



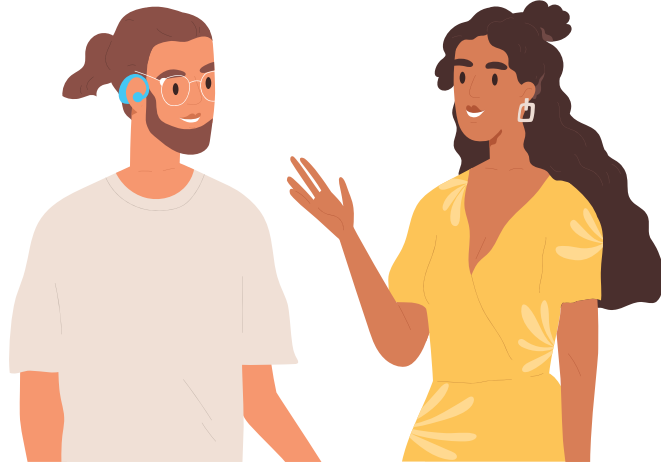

نصائح لمستعملي وسائل تقوية السمع

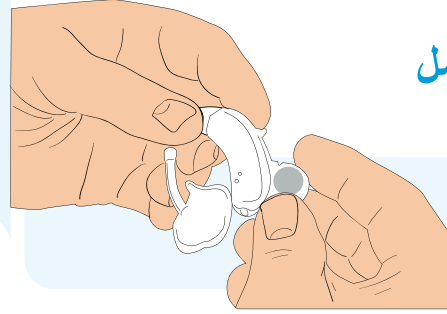

كيف أتأكد من عمل البطارية؟

قد تلزمك مساعدة
شخص آخر للقيام بذلك.

- 1 قم بإزالة وسيلة تقوية السمع من الأذن
- 2 شغل الوسيلة وارفع مستوى التحكم في الصوت إلى أقصى حد
- 3 ضع الوسيلة على راحة يدك
- 4 إذا أصدرت صفيراً مستمراً، فهذا يعني أن البطارية تعمل
- 5 إن لم تُصدر أي صفير، فينبغي تغيير البطارية
- 6 إذا استمرت في عدم إصدار أي صفير بعد استبدال البطارية بأخرى جديدة، فقد تكون هناك مشكلة أخرى، ويلزم فحصها

تذكّري

أن تفحص يومياً بطاريات وسائل
تقوية سمع الأطفال



WHO/UCN/NCD/SDR 23.4

© منظمة الصحة العالمية 2023. بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى الترخيص

CC BY-NC-SA 3.0 IGO

التقرير الم تفصل ل متاح على الرابط الالكتروني التالي

https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1

لماذا تُصدر وسيلة تقوية سمعي صغيراً؟

قد لا تكون قطعة الأذن مثبتة بشكل صحيح في الأذن، فانزعها ثم ضعها مجدداً. وإذا لم يحل ذلك المشكلة، فقد يلزمك فحص ملائمة مقاس قطعة الأذن وربما استبدالها.

هل يتعين تغيير قطعة الأذن والأنبوب بانتظام؟

نعم!

قد يلزم تغيير الأنبوب أو السلك
مرة كل 6 أشهر إلى 12 شهراً،
وينبغي أن يغيره طبيب سريري.

رئيسي
مع كابل



أنبوب

قطعة الأذن

قطعة الأذن


قالب الأذن

يجب استبدال سماع الأذن كل
6-12 شهراً.
يجب تغيير قالب الأذن المصنوع
حسب الطلب كل 1-3 سنوات أو
حسب توجيهات العامل الصحي
(ربما في كثير من الأحيان للأطفال
في مرحلة النمو).



كم مرة ينبغي أن أغير بطاريات وسيلة تقوية سمعي؟

يتعين عادةً تغيير البطاريات كل 7 إلى 10 أيام

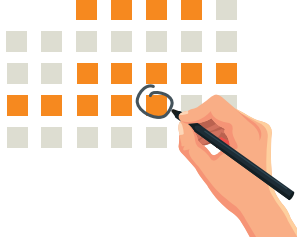

هل ينبغي أن أرتدي وسيلة تقوية سمعي في كل الأوقات أم عندما أريد الاستماع إلى شيء ما فقط؟



ينبغي أن ترتدي وسيلة تقوية سمعك في كل الأوقات طوال ساعات يقظتك

وسيلة تقوية سمعي لا تعمل كما ينبغي، ما المشكلة يا ترى؟

قد يلزم تغيير البطاريات. فافحصها!

قد يسد الشمع قطعة الأذن أو الأنبوب، فنظفهما!

قد يلزم تصليح الوسيلة، فاعرضها على تقني مختص بوسائل تقوية السمع!

كيف ينبغي أن اعتني بوسيلة تقوية سمعي؟

تجنب فقدان وسيلة تقوية سمعك أو إتلافها

احفظها في مكان آمن وبارد إن لم تستعملها



احفظها بعيداً عن الماء والحرارة في كل الأوقات



انزعها أثناء الاستحمام أو الاغتسال، لأنها قد لا تعمل كما ينبغي إن امتصت الرطوبة



افتح درج البطارية في الليل وضع جهاز تقوية السمع في وعاء بلاستيكي محكم الإغلاق وضع معها شيئاً جافاً، مثل المناديل الورقية الناعمة أو حبات الأرز



تأكد من إغلاق وسيلة تقوية السمع إن لم تستعملها



نظف قطعة الأذن بقطعة قماش جافة يومياً



قم بإزالة قطعة الأذن والأنبوب مرة واحدة شهرياً إذا أوعز الموزع بذلك



واغسلهما بالماء والصابون

واتركهما يجفان تماماً قبل ربطهما بوسيلة تقوية السمع مجدداً



ما هي وسيلة تقوية السمع؟

وسيلة تقوية السمع هي جهاز إلكتروني يرتديه المتعايش بفقدان السمع أو يضعه داخل أذنه ليساعد على تضخيم الأصوات ويمكنه من سماع الكلام والأصوات الأخرى بشكل أفضل.


يوجد أنواع عديدة ومختلفة من وسائل تقوية السمع وهي متوفرة بألوان وأحجام وأشكال شتى.

من أكثر أنواعها شيوعاً تلك الموضوعة خلف الأذن وداخلها.



ما هي الأجزاء المكونة لوسيلة تقوية السمع؟

تتكون وسيلة تقوية السمع المستعملة عادةً خلف الأذن من 3 أجزاء

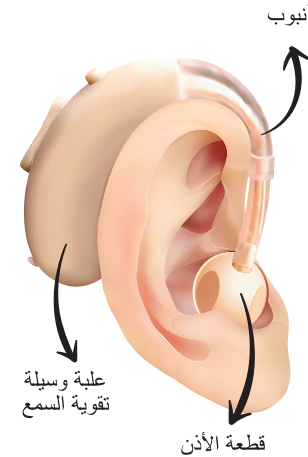

علبة وسيلة تقوية السمع التي توضع فوق الأذن وخلفها، وتؤوي النظام الإلكتروني لوسيلة تقوية السمع.

قطعة الأذن التي توصل الصوت إلى الأذن.

أنبوب أو سلك رفيع يربط الجزأين معاً.

وسيلة تقوية السمع التي توضع داخل الأذن تكون أصغر حجماً وتُدمج كل مكوناتها في جهاز واحد يُصمم خصيصاً ليناسب أذن الشخص.