



世界卫生组织

助听器为何发出啸叫声？

耳机可能没有正确塞入耳朵。将其取出重新塞入。如果问题持续存在，可能需要检查耳机的安装，并可能需要更换。

耳机和导声管一定要定期更换吗？ 是的！



导声管或缆线可能需要每6-12个月更换一次。这应该由临床医生来完成。




耳机需要每6-12个月更换一次。

定制的耳模必须每1-3年更换一次，或者按照卫生工作者的指示更换一次(对于正在成长的孩子可能更频繁)



如何检查电池是否工作？

这可能需要别人的帮助。

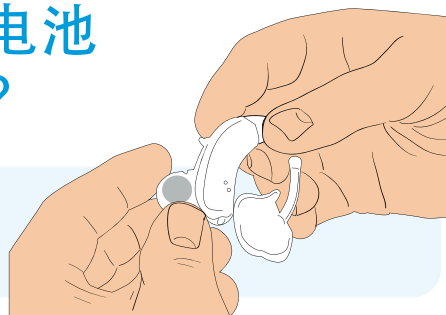

- 1 从耳朵上取下助听器
- 2 开启助听器电源，将音量控制调到最高设置
- 3 将助听器放在手掌中
- 4 如果有持续的啸叫声，则表明电池在工作
- 5 如果没有啸叫声，应更换电池
- 6 如果置入新电池后仍然没有啸叫声，则助听器可能有问题。需要进行检查

请记住

请每天检查儿童的助听器
电池状况



WHO/UCN/NCD/SDR 23.4

©世界卫生组织 2023。部分版权保留。作品署名-非商业性使用-相同方式共享的政府间组织3.0版本适用于该作品 (CC-BY-NC-SA 3.0 IGO)。

更多详情参见：

<https://www.who.int/health-topics/hearing-loss>



助听器 用户须知





什么是助听器？

助听器是一种戴在耳朵上或耳朵内的电子设备，帮助放大声音，使听力损失者能更好地听到语音和其他声音。

助听器有许多不同的类型，以及不同的颜色、尺寸和形状。

最常见的类型是耳后式和耳内式。



助听器有哪些部件？

常用的耳后式助听器有3个部件



助听器外壳位于耳朵上方和后方，里面装有助听器的电子系统。

(导声管将这两个部件连接起来。)

耳模或硅胶耳机将声音送入耳朵

耳内式助听器体积较小，所有部件都集成在一个特殊形状的装置中，以便能塞入耳内。

应当如何护理助听器？

为了避免丢失或损坏助听器



不使用时，请将其保存在安全阴凉的地方



任何时候都不要使其沾水和受热



洗澡时请将其摘下，如果助听器吸收水气，可能无法正常工作



夜晚，打开电池仓，将助听器与纸巾或大米等干燥物品一起放入密封的塑料盒中



不使用时，请确保关掉电源



每天用干布清洁耳机




如果按助听器配发方的指示，应每月一次卸下耳机和导声管

用肥皂水清洗它们

等它们完全干燥后再重新连接到助听器

应该多久更换一次助听器的电池？

电池通常需要每7-10天更换一次

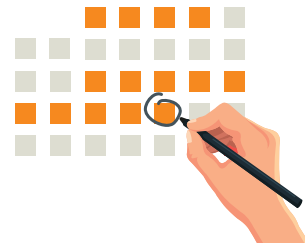

应该一直戴着助听器还是只在想听东西的时候才戴？

醒着的时候应该一直戴着助听器



助听器不正常工作，可能是什么问题？



可能需要更换电池。请测试一下！

耳垢可能堵塞耳机或管道。清洁耳机和导声管！

可能需要修理。拿去给助听器技师！